

Gebrauchsanweisung

AER0way® - Fast
Druckminderer / Flow-Regler

AER0way® - Fine
Druckminderer / Flow-Meter

AER0way® - Fix I und Fix II
Druckminderer



1.	Wichtige Gebrauchshinweise	2
2.	Verwendungszweck und Funktionsbeschreibung	2
3.	Bedienung/Handhabung AEROWay® - Fast/Fine	3
4.	Bedienung/Handhabung AEROWay® - Fix	4
5.	Flaschenwechsel	5
6.	Funktionskontrolle AEROWay® - Fast/Fine/Fix	5 / 6
7.	Reinigung	6
8.	Wartung	6 / 7
9.	Sicherheitshinweise	7
10.	Garantie	7
11.	Zeichenerklärung	7
12.	Abbildungen und technische Daten AEROWay® - Fast/Fine	8 - 19
12.1	AEROWay® Fast und Fast -KL, -KR	
12.2	AEROWay® Fast -KLPS/ -KRPS/ -KLPS2/ -KRPS2/ -KLSA/ -KRSA	
12.3	AEROWay® Fast -V / -PS / -PSV	
12.4	AEROWay® Fast ...-ZGA	
12.5	AEROWay® Fine und Fine -SI, -SIB, -SIPS	
12.6	AEROWay® Fine ...-ZGA	
12.7	AEROWay® Fast Druckminderer-Übersicht	
12.8	AEROWay® Fine Druckminderer-Übersicht	
13.	Abbildungen und technische Daten AEROWay® - Fix	19 - 22
13.1	AEROWay® Fix II, Fix II- PS	
13.2	AEROWay® Fix I 4, Fix I 6, Fix I 8, Fix I 10	
13.3	AEROWay® Fix I 1.6 / ...	
13.4	AEROWay® Fix II & Fix I Druckminderer-Übersicht	
14.	Ersatzteile für AEROWay® - Druckminderer/Flowregler	23

1. Wichtige Gebrauchshinweise

- 1.1 Führen Sie vor jeder Inbetriebnahme eine Sichtprüfung durch!
Das Gerät darf nicht eingesetzt werden, wenn:
- mechanische Beschädigungen ersichtlich sind!
- der Dichtring im Eingangs-Hochdruckanschluss fehlt!
- 
- 1.2 Vor dem ersten Gebrauch eine Funktionskontrolle durchführen (siehe Seite 5)!
- 1.3 Sauerstoff-Flaschen gegen Umfallen sichern (z.B. 5-Fuß-Fahrgestelle)!
- 1.4 Geräte öl- und fettfrei halten! Explosionsgefahr!
Insbesondere Öle, Fette, Reinigungsalkohole, Handcreme oder Klebstoffe (also typische Kohlenwasserstoffverbindungen) können zu explosionsartigen Reaktionen führen, wenn diese mit hochkomprimiertem Sauerstoff in Berührung kommen!
- 
- 1.5 Vor dem Flaschenwechsel unbedingt die Hände waschen!
- 
- 1.6 Keine Flüssigkeiten, wie z. B. Desinfektionsmittel, zum Reinigen von Druckminderern verwenden!
- 1.7 Bei Montage und Flaschenwechsel alle Verschraubungen nur von Hand anziehen. Kein Werkzeug verwenden!
- 
- 1.8 Flaschenventil stets langsam öffnen!
- 1.9 Rauchen und offenes Feuer sind in der Nähe von Sauerstoffgeräten strengstens verboten!
- 
- 1.10 Sauerstoff-Flaschen nur bis zu einem Restdruck von ca. 5 bar entleeren!
- 
- 1.11 Stets für ausreichend gefüllte Sauerstoff-Flaschen sorgen!
Es empfiehlt sich, eine gefüllte Reserve-Sauerstoff-Flasche bereitzuhalten.

2. Verwendungszweck und Funktionsbeschreibung

- 2.1 Die Druckminderer dienen der druckreduzierten Entnahme aus Druckgasflaschen (O₂, Air) zur Versorgung unterschiedlicher Geräte.
- 2.2 Der Druckminderer reduziert den Flaschendruck von max. 200 bar auf den erforderlichen Betriebsdruck. Am Inhaltsmanometer kann der Flaschendruck in "bar" abgelesen werden.
- 2.3 Durch die eingebaute Entlastungsvorrichtung (Sicherheitsventil) sind die Druckminderer und die angeschlossenen Geräte gegen Überdruck geschützt.
- 2.4 Die angebauten Sekretabsauggeräte (Injektoren) dienen dazu, aus der Druckgasquelle der Flasche einen Sog zu erzeugen, ihn anzupassen und zu regeln. Sie werden eingesetzt, um Substanzen (z.B. Blut, Sekret, Schleim usw.) aus dem Körper eines Patienten während chirurgischer und anderer Behandlungsmethoden zu entfernen.

3. Bedienung/Handhabung AEROWay® - Fast/Fine

- 3.1 Stellen Sie sicher, dass sich am Anschlussgewinde des Flaschenventils und des Druckminderers absolut keine Verschmutzungen befinden. Flaschenventil kurz öffnen und wieder schließen, damit mögliche Schmutzpartikel weggeblasen werden. Halten Sie die Flasche unbedingt so, dass der Anschluss nie auf Sie oder andere Personen zeigt.
- 3.2 Überprüfen Sie das Vorhandensein des Original-Dichtrings im Eingangs-Hochdruckanschluss!
- 3.3 Drehen Sie die Handanschlussmutter des Druckminderers durch Rechtsdrehung an das Flaschenventil. Dafür auf keinen Fall Schraubenschlüssel oder anderes Werkzeug verwenden! Die AEROWay® - Fast ZGA und AEROWay® - Fine ZGA werden ihrem Anschlussstecker nach DIN 13260 an eine Gasquelle angeschlossen:
 - a) Direkt in den Zentralen-Gasanschluss/die DIN-Steckdose oder mit zusätzlichem Druckschlauch mit Halteplatte zum Einschub in Wandschienenklau (Krankenhaus, Rettungswagen etc.)
 - b) Direkt an einen Druckminderer, der mit einer Schnellkupplung nach DIN 13260 ausgestattet ist.
- 3.4 **Inhalation:**
Stellen Sie sicher, dass das Einstellrad beim AEROWay® - Fine durch Rechtsdrehung vollständig geschlossen ist bzw. beim AEROWay® - Fast auf "0" steht.
- 3.5 Öffnen Sie bitte das Sauerstoff-Flaschenventil durch langsame Linksdrehung um maximal eine Umdrehung.
- 3.6 Bei den einstellbaren Druckminderern/Mengenreglern AEROWay® - Fast und Fine können Sie jetzt den gewünschten Flow in Liter pro Minute am Einstellrad regeln und den eingestellten Wert von der Skala des Flowmeterröhrchens (beim AEROWay® - Fine) oder der Mengenregelblende (beim AEROWay® - Fast) ablesen.
- 3.7 Nach Beendigung der Abgabe schließen Sie bitte das Ventil der Druckgasflasche durch Rechtsdrehung.
- 3.8 Danach das Einstellrad beim AEROWay® - Fine durch Rechtsdrehung vollständig schließen bzw. beim AEROWay® - Fast auf "0" stellen.
- 3.9 **Absaugung:**
Beim AEROWay® - Fast 15-V und 15-PSV kann zusätzlich über den separaten Injektor abgesaugt werden. Dazu bitte den Absperrhahn durch Linksdrehung öffnen bzw. nach Beendigung des Absaugvorgangs durch Rechtsdrehung wieder schließen. Beim AEROWay® - Fine 15-SI, 15-SIB und 15-SIPS kann ebenfalls zusätzlich über den angebauten Injektor abgesaugt werden. Das gewünschte Vakuum können Sie am Einstellrad regeln und den eingestellten Wert auf dem

Manometer ablesen Nach Beendigung der Absaugung das Einstellrad durch Rechtsdrehung wieder schließen.

3.10 Abgang DIN-Kupplung:

Beim AEROWay® - Fast 15-KLPS, -KRPS, -KLPS2, -KRPS2, -PS, -PSV sowie beim AEROWay® - Fine 15-SIPS besteht weiterhin die Möglichkeit der Sauerstoff-/ Gasentnahme über eine (oder zwei) Schnellkupplung(en) nach DIN 13260. Hierzu den DIN-Stecker in die Kupplung stecken.

3.11 Abgang Beatmung/Inhalation über zusätzlichen Absperrhahn:

Beim AEROWay® - Fine 15-SIB kann zusätzlich am separaten Abgang mit einem festen Flow von 15 l/min. (mit Absperrhahn Auf/Zu) ein Beatmungsbeutel angeschlossen werden. Dazu den Sauerstoffsicherheitsschlauch (z.B. AEROpact® - SS05-2.1) an der Schlauchanschlussstülle aufstecken und die Verbindung mit dem O₂-Anschlussstutzen des Beatmungsbeckens herstellen.

4. Bedienung/Handhabung AEROWay® - Fix I/Fix II

- 4.1 Stellen Sie sicher, dass sich am Anschlussgewinde des Flaschenventils und des Druckminderers absolut keine Verschmutzungen befinden. Flaschenventil kurz öffnen und wieder schließen, damit mögliche Schmutzpartikel weggeblasen werden. Halten Sie die Flasche unbedingt so, dass der Anschluss nie auf Sie oder andere Personen zeigt.
- 4.2 Drehen Sie die Handanschlussmutter des Druckminderers durch Rechtsdrehung an das Flaschenventil. Dafür auf keinen Fall Schraubenschlüssel oder anderes Werkzeug verwenden!
- 4.3 Jetzt können Sie die Sauerstoffbrille oder Maske (nur bei AEROWay® - Fix I 4, Fix I 6, Fix I 8 und Fix I 10) anschließen, bzw. die Verbindung zum Gerät das betrieben werden soll, mittels eines Druckschlauches entsprechend der jeweiligen Gasart und mit den erforderlichen Anschlüssen, herstellen. Dazu müssen Sie die entsprechende Schlauchanschlussstülle am Druckminderer anschrauben und mit dem Anschlusschlauch der Brille, Maske oder des Druckschlauches für die Geräteversorgung verbinden.
- 4.4 Öffnen Sie bitte das Sauerstoff-Flaschenventil durch langsame Linksdrehung um maximal eine Umdrehung.
- 4.5 Beim Druckminderer AEROWay® - Fix II ...-PS besteht darüber hinaus die Möglichkeit der Sauerstoff-/Gasentnahme über eine separate Schnellkupplung nach DIN 13260. Hierzu den DIN-Stecker in die Kupplung stecken.
- 4.6 Nach Beendigung der Abgabe schließen Sie bitte das Ventil der Druckgasflasche durch Rechtsdrehung.
- 4.7 Bitte das restliche Gas im System verbrauchen, damit der Druckminderer entlastet wird und nicht permanent unter Druck steht.

5. Flaschenwechsel

- 5.1 Flaschenventil durch Rechtsdrehung schließen.
- 5.2 Druckminderer drucklos machen, indem Sie den restlichen Sauerstoff bzw. das restliche Gas verbrauchen.
- 5.3 Erst jetzt können Sie den Druckminderer am Handanschluss vom Flaschenventil lösen.
- 5.4 Kontrollieren Sie ob der Dichtring nicht verschmutzt oder beschädigt ist und korrekt im Dichtsitz liegt.
- 5.5 Jetzt gehen Sie wieder, wie unter "Bedienung/Handhabung" beschrieben, vor.

6. Funktionskontrolle AEROWay® - Fast/Fine/Fix I/Fix II

- 6.1 Der Betreiber muss eine Funktionskontrolle durchführen:
 - Vor dem ersten Gebrauch
 - Nach jedem Flaschenwechsel und jeder Montage
 - Nach jedem Gebrauch mindestens jedoch alle 6 Monate
- 6.2 Dichtigkeitsprüfungen lassen sich an allen Druckminderern in Verbindung mit angeschlossenen Geräten bei abgesperrtem Flow durchführen.
- 6.3 Die angeschlossenen Geräte müssen ausgeschaltet sein.
- 6.4 Den Druckminderer drucklos machen (siehe "Flaschenwechsel") sowie alle Verschraubungen und Verbindungen auf festen Sitz kontrollieren, ggf. von Hand nachziehen. Das Einstellrad für den Flow beim AEROWay® - Fine ganz nach rechts auf „off“ und beim AEROWay® - Fast ganz nach links auf „0“ stellen.
- 6.5 Das Flaschenventil langsam öffnen.
- 6.6 Jetzt das Flaschenventil wieder schließen.
- 6.7 Den Zeiger des Inhaltsmanometers etwa 1 Minute beobachten. Bleibt die Zeigerstellung konstant, ist die Dichtigkeit des Systems gewährleistet. Fällt dagegen der Zeiger kontinuierlich ab, liegt eine Undichtigkeit vor.
- 6.8 Mit Hilfe einer Seifenwasserlösung kann die undichte Stelle, durch Benetzung der Schraubverbindungen, lokalisiert werden.
- 6.9 Die schadhaften Teile auswechseln. Wir empfehlen, Ersatzdichtungen für die Geräteanschlüsse vorrätig zu halten.
- 6.10 Nach Behebung der Undichtigkeit die Funktionskontrolle erneut durchführen. Danach ist das Gerät wieder betriebsbereit.
- 6.11 **Vakuum Injektor:**
Drehen Sie den Drehknopf bis zum Anschlag nach rechts. Ziehen Sie den Vakuumschlauch ab und halten Sie den Vakuumanschluss zu.

- 6.12 Lesen Sie am Manometer den Wert ab, der sich konstant einstellt.
Dieser Wert muss mindestens -600 bis -700mbar betragen.
- 6.13 Die Stetigkeit des voreingestellten Vakuumniveaus können Sie kontrollieren indem Sie durch Öffnen der Patientenseite eine Absaugung erzeugen, die Sie dann wieder unterbrechen.
- 6.14 Venturi-Sekretabsauger (Injektoren) sollten mit einem Reservoir-/Überlaufbehälter inklusive antibakteriellem Papierfilter eingesetzt werden. Alternativ sind sie mit einem Schlauchanschluss versehen.

7. Reinigung

- 7.1 Verwenden Sie bitte ausschließlich ein sauberes, trockenes oder ein mit sauberem, warmem Wasser befeuchtetes Tuch.
- 7.2 Auf keinen Fall den Druckminderer in eine Desinfektionslösung legen!
Es darf keine Flüssigkeit in den Druckminderer eindringen!
- 7.3 Bei einer notwendigen Wischdesinfektion empfehlen wir GIGASEPT FF.
Beachten Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung.
- 7.4 Entsorgen Sie Flüssigkeiten wie Blut und Sekrete, sowie damit kontaminierte Teile, gemäß den Richtlinien des Bundesgesundheitsblattes „Anforderungen der Hygiene an die Abfallentsorgung“ (Herausgegeben vom Bundesgesundheitsamt, zu beziehen über den Carl Heymanns Verlag Köln).
- 7.5 Bei Verwendung eines Reservoir-/Überlaufbehälters beachten Sie bitte die entsprechende Gebrauchsanweisung. Der Filter sollte bei jedem Patienten, bei langer Standzeit oder je nach Verschmutzungsgrad gewechselt werden.

8. Wartung

- 8.1 Der Austausch von Dichtringen an Anschlüssen des Druckminderers muss alle 6 Monate (bei Bedarf eher) durchgeführt werden und darf durch den Betreiber erfolgen.
- 8.2 Die Geräte müssen alle 5 Jahre einer Sicherheitsüberprüfung und alle 10 Jahre einer Grundüberholung durch den Hersteller oder einem autorisierten Unternehmen unterzogen werden.
- 8.3 Sauerstoff-Flaschen:
 - Wiederholungsprüfung durch den TÜV - alle 10 Jahre
(bei Leichtflaschen - Aluminium/Fiberglas - alle 3 Jahre)
 - Verfallsdatum des med. Sauerstoffs --> siehe Etikett auf der Flasche.
- 8.4 Injektor:
Bei der Kontrolle der Zeigeranzeige darf die Abweichung maximal $\pm 5\%$ des maximalen Manometervakuumwertes betragen. Der Schalldämpfer-Filz sollte mindestens jährlich erneuert werden.

- 8.5 Sicherheitsfahrgeestelle, Flaschenmäntel, Atemgasbefeuchter, Absauggefäße und Halterungen, Sauerstoff-Brillen und -Masken sowie AERObag® - Beatmungsbeutel sind wartungsfrei.
- 8.6 Entsorgung:
Zur sachgerechten Entsorgung von AERObreat® wenden Sie sich bitte an einen zugelassenen zertifizierten Schrottverwerter. Dessen Adresse erfragen Sie bitte bei Ihrem Umweltbeauftragten oder bei Ihrer Stadtverwaltung.











9. Sicherheitshinweise

- 9.1 Beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung. Sie ist Bestandteil des Gerätes. Jede Handhabung an dem Gerät setzt die genaue Kenntnis und Beachtung dieser Gebrauchsanweisung voraus.
- 9.2 Es dürfen nur Original-Ersatzteile bei den Geräten verwendet werden.
- 9.3 Beachten Sie die "Wichtigen Gebrauchshinweise" am Anfang dieser Gebrauchsanweisung!
- 9.4 Verwenden Sie das Gerät nur für den beschriebenen Verwendungszweck (siehe unter 2. Verwendungszweck)!

10. Garantie

- 1 Jahr Garantie gemäß unseren Garantiebestimmungen:
- gewähren wir ab Kaufdatum auf Material- oder Fabrikationsfehler
 - gewähren wir nur in Verbindung mit dem Kaufbeleg.

11. Zeichenerklärung


	Latex frei Latex free		Vor Hitze und Licht schützen Store away from heat and light
	Nicht zur Wiederverwendung Not for reuse		Bestellnummer Order number
	Gebrauchsanweisung beachten Consider instruction manual		Chargenbezeichnung Batch number
	Haltbar bis Durable to		Enthält Phthalat Contains Phthalate
	Hergestellt am Date of manufacture		Phthalatfrei Phthalate free

12. Abbildungen und technische Daten


12.1 AEROWay® - Fast 15-KL / -KR und Fast 1 / 5 / 15 / 50



11.2 AEROWay® - Fast 15-KLPS/ -KRPS/ -KLPS2/ -KRPS2/ -KLSA/ -KRSA

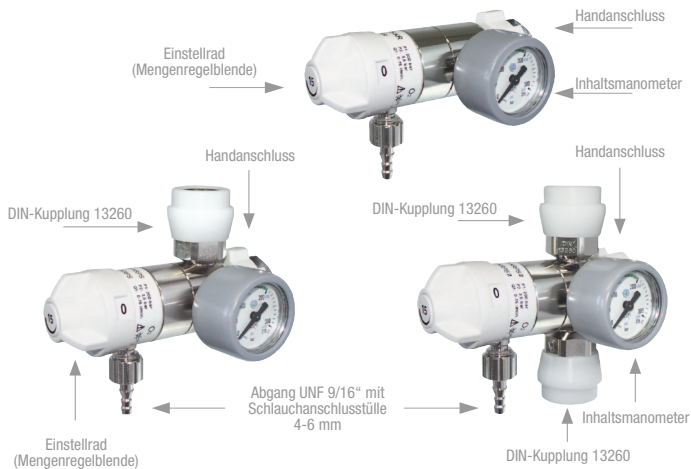

12.3 AEROway® - Fast 15-V / Fast 15-PS / Fast 15-PSV

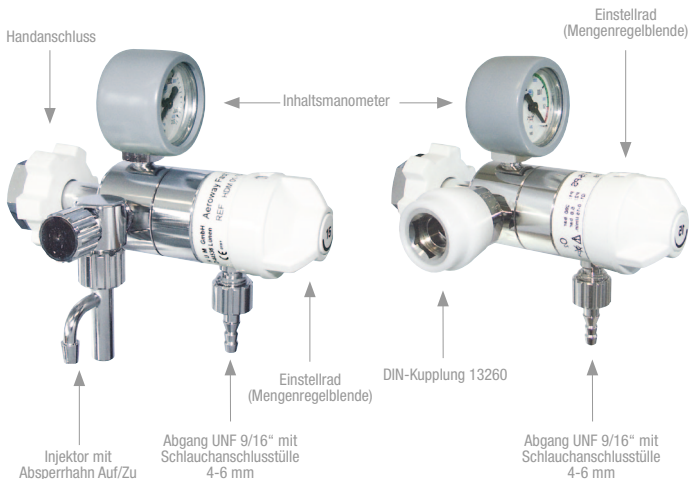

Version -PSV
mit DIN-Kupplung
und Vakuum-Injektor



Technische Daten

Medizinischer Druckminderer für Sauerstoff (O₂), Druckluft (Air) *
mit Inhaltsmanometer und Mengenregelblende

Eingang Hochdruck-Handanschluss -> länderspezifisches Gewinde

Abgang UNF 9/16" Außengewinde mit Schlauchanschlussstülle für 4-6 mm Schläuche

Zusätzlicher Abgang 4.5 bar (160 l/min.) als Kupplung nach DIN 13260 (AEROWay® - Fast 15-PS/-PSV sowie AEROWay® - Fast 15-KLPS/-KRPS/-KLPS2/-KRPS2)

Zusätzlicher Abgang Vakuum als Injektor mit Absperrhahn der Funktion "Auf" und "Zu".

Max. erreichbares Vakuum -676 mbar / Absaugflowleistung 270 mbar bei 5 l/min.

(nur bei AEROWay® - Fast 15-V und AEROWay® - Fast 15-PSV)

AEROWay® - Fast 1 bis 50: 800 g; L 150 mm, H 110 mm, B 50 mm, Ø 44 mm

AEROWay® - Fast 15-V: 930 g; L 150 mm, H 132 mm, B 80 mm, Ø 44 mm

AEROWay® - Fast 5-PS: 870 g; L 150 mm, H 110 mm, B 80 mm, Ø 44 mm

AEROWay® - Fast 15-PS: 870 g; L 161 mm, H 110 mm, B 80 mm, Ø 44 mm

AEROWay® - Fast 15-PSV: 1010 g; L 150 mm, H 132 mm, B 120 mm, Ø 44 mm

AEROWay® - Fast 15-KL: 780 g; L 130 mm, H 60 mm, B 80 mm, Ø 44 mm

AEROWay® - Fast 15-KR: 780 g; L 130 mm, H 60 mm, B 80 mm, Ø 44 mm

AEROWay® - Fast 15-KLPS: 870 g; L 130 mm, H 96 mm, B 80 mm, Ø 44 mm

AEROWay® - Fast 15-KRPS: 870 g; L 130 mm, H 96 mm, B 80 mm, Ø 44 mm

AEROWay® - Fast 15-KLSA: 870 g; L 130 mm, H 96 mm, B 80 mm, Ø 44 mm

AEROWay® - Fast 15-KLRA: 870 g; L 130 mm, H 96 mm, B 80 mm, Ø 44 mm

AEROWay® - Fast 15-KLPS2: 960 g; L 130 mm, H 120 mm, B 80 mm, Ø 44 mm

AEROWay® - Fast 15-KRPS2: 960 g; L 130 mm, H 120 mm, B 80 mm, Ø 44 mm

Lagertemperatur: - 20 °C bis + 40 °C

Arbeitstemperatur: - 10 °C bis + 40 °C

P1 - max. Eingangsdruck: 200 bar

P2 - Ausgangsdruck: 4.5 bar *

Q1 - Flow in l/min.: 0-5-10-15-20-25-30-35-40-50 (AEROWay® Fast 50) *

Q1 - Flow in l/min.: 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 (alle AEROWay® Fast 15 ...) *

Q1 - Flow in l/min.: 0-0,5-0,8-1-1,5-2-2,5-3-4-5 (AEROWay® Fast 5) *

Q1 - Flow in l/min.: 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1 (AEROWay® Fast 1)

Seriennummer: siehe Gravur (8-stellige Gerätenummer)

Wartung alle 60 Monate durch den Hersteller

Geräteklasse nach MPG II b

* Unbedingt die Kennzeichnung am Druckminderer beachten!

12.4 AEROWay® - Fast ...-ZGA, ...S-ZGA

Halteplatte zum Einschub
in Wandschienenklaue,

Einstellrad
(Mengenregelblende)

Abgang UNF 9/16"


Einstellrad
(Mengenregelblende)

DIN-Stecker 13260

Abgang UNF 9/16"

1,5 m Schlauch mit
DIN-Stecker 13260

Doppel-Flowregler
(Beschriftungen
siehe oben)

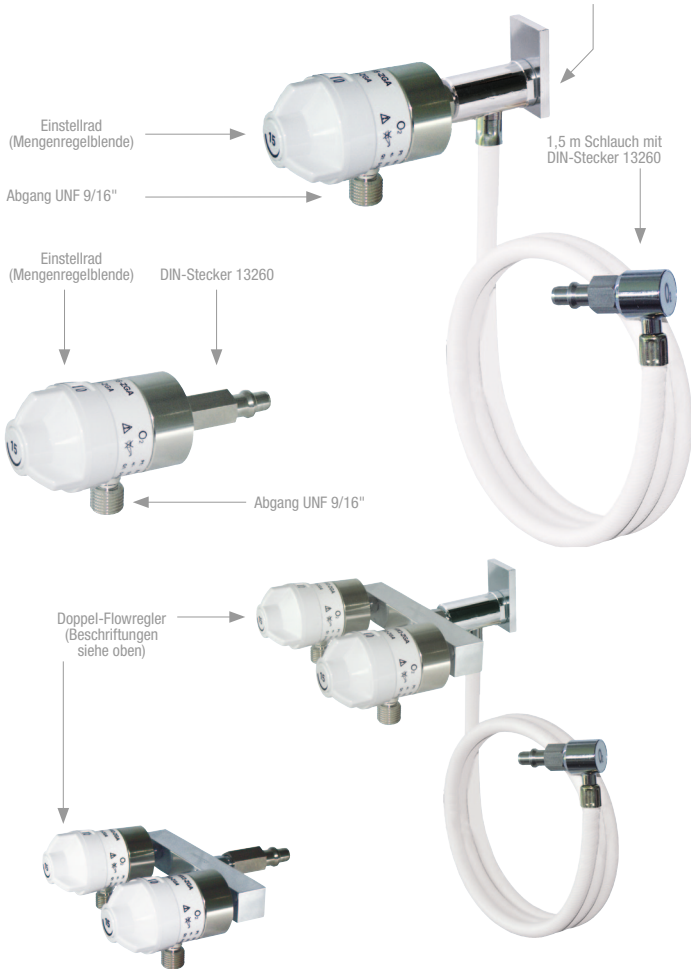

Technische Daten

Medizinische Flowregler für Sauerstoff (O₂), Druckluft (Air) * mit Mengenregelblende
Eingang DIN-Stecker 13260 oder 1,5 m Druckschlauch mit DIN-Stecker 13260
Abgang UNF 9/16" Aussengewinde

AEROWay® - Fast 1-ZGA
bis 50-ZGA: 350 g; L 125 mm, H 57 mm, B 44 mm, Ø 44 mm

AEROWay® - Fast 1S-ZGA
bis 50S-ZGA: 720 g; L 119 mm, H 57 mm, B 44 mm, Ø 44 mm

AEROWay® - Fast-1X2-ZGA
bis 50X2-ZGA: 740 g; L 160 mm, H 57 mm, B 145 mm, Ø 44 mm

AEROWay® - Fast-1X2S-ZGA
bis 50X2S-ZGA: 1070 g; L 180 mm, H 57 mm, B 145 mm, Ø 44 mm

AEROWay® - Fast-15-EB: 338 g; L 110 mm, H 60 mm, B 50 mm, Ø 50 mm

Lagertemperatur: - 20 °C bis + 40 °C

Arbeitstemperatur: - 10 °C bis + 40 °C

P1 - max. Eingangsdruck: 4,5-6 bar *

Q1 - Flow in l/min.: 0-5-10-15-20-25-30-35-40-50
(AEROWay® Fast 50)

Q1 - Flow in l/min.: 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15
(AEROWay® Fast 15)

Q1 - Flow in l/min.: 0-0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3-4-5
(AEROWay® Fast 5)

Q1 - Flow in l/min.: 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1
(AEROWay® Fast 1)


Seriennummer: siehe Gravur (8-stellige Gerätenummer)

Wartung alle 60 Monate durch den Hersteller

Geräteklasse nach MPG II a

* Unbedingt die Kennzeichnung am Flowregler beachten!

12.5 AEROway® - Fine 15 und Fine 15-SI / 15-SIB / 15-SIPS

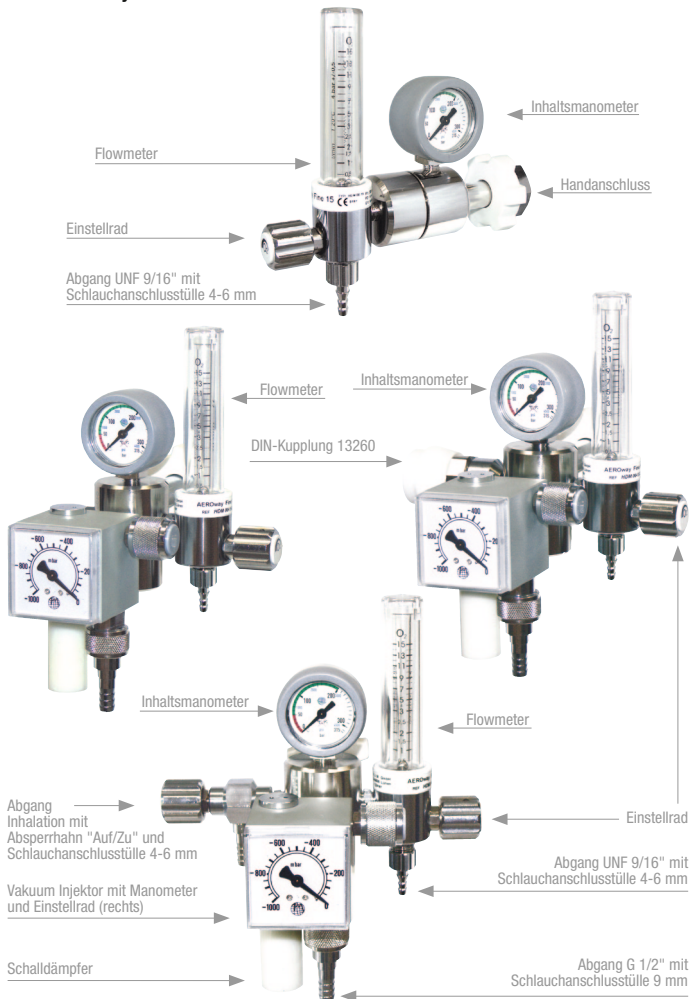

Technische Daten

Medizinische Druckminderer für Sauerstoff (O₂), Druckluft (Air) *
mit Inhaltsmanometer und mit angebautem, druckkompensiertem Flowmeter

Eingang Hochdruck-Handanschluss -> länderspezifisches Gewinde

Abgänge UNF 9/16" Aussengewinde mit Schlauchanschlussstülle für 4-6 mm Schläuche

Zusätzlicher Abgang 4.5 bar (160 l/min.) als Kupplung nach DIN 13260
(AEROWay® - Fine 15-SIPS)

Zusätzlicher Abgang Inhalation, fest eingestellt auf 15 l/min. mit Absperrhahn "Auf/
Zu"
(AEROWay® - Fine 15-SIB)

Zusätzlicher Abgang Vakuum mit regelbarem Injektor mit Manometer
Maximal erreichbares Vakuum -700 mbar bei einem maximalen Flow von 25 l/min.
Gasverbrauch 10 % in l/min. des eingestellten Vakuumwertes.

(AEROWay® - Fine 15-SI, AEROWay® - Fine 15-SIB und AEROWay® Fine 15-SIPS).

AEROWay® - Fine 15: 940 g; L 165 mm, H 140 mm, B 43 mm, Ø 44 mm

AEROWay® - Fine 15-SI: 1580 g; L 175 mm, H 200 mm, B 125 mm,

AEROWay® - Fine 15-SIB: 1720 g; L 175 mm, H 200 mm, B 172 mm,

AEROWay® - Fine 15-SIPS: 1740 g; L 175 mm, H 200 mm, B 165 mm,

Lagertemperatur: - 20 °C bis + 40 °C

Arbeitstemperatur: - 10 °C bis + 40 °C

P1 - max. Eingangsdruck: 200 bar

P2 - Ausgangsdruck: 4.5 bar *

Q1 - Flow in l/min.: stufenlos bis 15 *

Seriennummer: siehe Gravur (8-stellige Gerätenummer)

Wartung alle 60 Monate durch den Hersteller

Geräteklasse nach MPG II b

* Unbedingt die Kennzeichnung am Druckminderer beachten!

12.6 AEROway® - Fine ...ZGA, ...S-ZGA



Technische Daten

Medizinisches Flowmeter für Sauerstoff (O₂), Druckluft (Air) *
druckkompensiertem Flowmeter

Eingang DIN-Stecker 13260 oder 1,5 m Druckschlauch mit DIN-Stecker 13260
Abgang UNF 9/16" Außengewinde

AEROWay® - Fine 15F-ZGA: 370 g; L 119 mm, H 140 mm, B 32 mm, Ø 32 mm

AEROWay® - Fine 15FS-ZGA: 730 g; L 116 mm, H 140 mm, B 32 mm, Ø 32 mm

AEROWay® - Fine 15F2-ZGA: 810 g; L 150 mm, H 140 mm, B 131 mm, Ø 32 mm

AEROWay® -Fine 15F2S-ZGA: 1210 g; L 180 mm, H 140 mm, B 131 mm, Ø 32 mm

Lagertemperatur: - 20 °C bis + 60 °C

Arbeitstemperatur: - 10 °C bis + 40 °C

P1 - max. Eingangsdruck: 4.5-6 bar *

Q1 - Flow in l/min.: stufenlos bis max. 1.5, 5, 15 oder 30 *

Flowgenauigkeit: +/- 10 %

Seriennummer: siehe Gravur (8-stellige Gerätenummer)

Wartung alle 60 Monate durch den Hersteller

Geräteklasse nach MPG II a

* Unbedingt die Kennzeichnung am Flowmeter beachten!

11.7 AEROWay® Fast - Übersicht Druckminderprogramm

Modell/Bezeichnung	Best.-Nr.	Einstellung / Leistung (Flow/Druck)	Anschluss/-boizen
AEROWay® - Fast 1	HDM 01-1	stufenweise / 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1 l/min.	G3/4 IG / ca. 50 mm
AEROWay® - Fast 5	HDM 01-5	stufenweise / 0-0,5-0,8-1-1,5-2-2,5-3-4-5 l/min.	G3/4 IG / ca. 50 mm
AEROWay® - Fast 15	HDM 01-15	stufenweise / 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min.	G3/4 IG / ca. 50 mm
AEROWay® - Fast 50	HDM 01-50	stufenweise / 0-5-10-15-20-25-30-35-40-50 l/min.	G3/4 IG / ca. 50 mm
AEROWay® - Fast 15-EB	HDM 01-15-EB	stufenweise / 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min.	Schl.-Anschl. 6 mm + Blende
AEROWay® - Fast 15-KL / KR	HDM 01-15-KL / KR	stufenweise / 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min.	G3/4 IG / ca. 15 mm
AEROWay® - Fast 15-KLPS / KRPS	HDM 01-15- KLPS / KRPS	stufenweise / 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min. 100 l/min. (DIN-Kupplung)	G3/4 IG / ca. 15 mm
AEROWay® - Fast 15-KLSA / KRSA	HDM 01-15- KLSA / KRSA	stufenweise / 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min.	G3/4 IG / ca. 15 mm
AEROWay® - Fast 15-KLPSZ / KRPSZ	HDM 01-15- KLPSZ / KRPSZ	stufenweise / 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min. 100 l/min. (an jeder DIN-Kupplung)	G3/4 IG / ca. 15 mm
AEROWay® - Fast 15-PS	HDM 01-15-PS	stufenweise / 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min. 100 l/min. (DIN-Kupplung)	G3/4 IG / ca. 50 mm
AEROWay® - Fast 15-PSV	HDM 01-15-PSV	stufenweise / 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min. 100 l/min. (DIN-Kupplung) / -676 mbar (max. Vakuum)	G3/4 IG / ca. 50 mm
AEROWay® - Fast 15-V	HDM 01-15-V	stufenweise / 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min. -676 mbar (max. Vakuum)	G3/4 IG / ca. 50 mm
AEROWay® - Fast 1-ZGA	HDM 01-1-ZGA	stufenweise / 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1 l/min.	DIN Stecker 13260
AEROWay® - Fast 15-ZGA	HDM 01-15-ZGA	stufenweise / 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1 l/min.	dto. + 1,5 m Schlauch
AEROWay® - Fast 1x2-ZGA	HDM 01-1x2-ZGA	stufenweise / 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1 l/min.	DIN Stecker 13260
AEROWay® - Fast 1x2S-ZGA	HDM 01-1x2S-ZGA	stufenweise / 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1 l/min.	dto. + 1,5 m Schlauch
AEROWay® - Fast 5-ZGA	HDM 01-5-ZGA	stufenweise / 0-0,5-0,8-1-1,5-2-2,5-3-4-5 l/min.	DIN Stecker 13260
AEROWay® - Fast 5S-ZGA	HDM 01-5S-ZGA	stufenweise / 0-0,5-0,8-1-1,5-2-2,5-3-4-5 l/min.	dto. + 1,5 m Schlauch
AEROWay® - Fast 5x2-ZGA	HDM 01-5x2-ZGA	stufenweise / 0-0,5-0,8-1-1,5-2-2,5-3-4-5 l/min.	DIN Stecker 13260
AEROWay® - Fast 5x2S-ZGA	HDM 01-5x2S-ZGA	stufenweise / 0-0,5-0,8-1-1,5-2-2,5-3-4-5 l/min.	dto. + 1,5 m Schlauch
AEROWay® - Fast 15-ZGA	HDM 01-15-ZGA	stufenweise / 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min.	DIN Stecker 13260
AEROWay® - Fast 15S-ZGA	HDM 01-15S-ZGA	stufenweise / 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min.	dto. + 1,5 m Schlauch
AEROWay® - Fast 15x2-ZGA	HDM 01-15x2-ZGA	stufenweise / 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min.	DIN Stecker 13260
AEROWay® - Fast 15x2S-ZGA	HDM 01-15x2S-ZGA	stufenweise / 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min.	dto. + 1,5 m Schlauch
AEROWay® - Fast 50-ZGA	HDM 01-50-ZGA	stufenweise / 0-5-10-15-20-25-30-35-40-50 l/min.	DIN Stecker 13260
AEROWay® - Fast 50S-ZGA	HDM 01-50S-ZGA	stufenweise / 0-5-10-15-20-25-30-35-40-50 l/min.	dto. + 1,5 m Schlauch
AEROWay® - Fast 50x2-ZGA	HDM 01-50x2-ZGA	stufenweise / 0-5-10-15-20-25-30-35-40-50 l/min.	DIN Stecker 13260
AEROWay® - Fast 50x2S-ZGA	HDM 01-50x2S-ZGA	stufenweise / 0-5-10-15-20-25-30-35-40-50 l/min.	dto. + 1,5 m Schlauch

Alle Druckminderer sind auch für die Gasart Air (Druckluft) erhältlich - die Artikel-Nummer ist dann HDM 04-... | Der 02- oder Air-Abgang ist UNF 9/16" - ohne (alle -ZGA) / - mit (alle anderen) Schlauchanschlusstülle 6 mm / AG = Ausseigwinde / IG = Innengewinde


12.8 AEROWay® - Fine - Übersicht Druckmindererprogramm

Modell/Bezeichnung	Best.-Nr.	Einstellung / Leistung (Flow/Druck)	Anschluss/-boizen
AEROWay® - Fine 15	HDM 00-15	stufenlos / 0-15 l/min.	G3/4 IG / ca. 50 mm
AEROWay® - Fine 15-SI	HDM 00-15-SI	stufenlos / 0-15 l/min. -700 mbar (max. Vakuum)	G3/4 IG / ca. 70 mm
AEROWay® - Fine 15-SIB	HDM 00-15-SIB	stufenlos / 0-15 l/min. -700 mbar (max. Vakuum) 15 l/min. (sep. Abgang Inhalation m. Absperrhahn)	G3/4 IG / ca. 70 mm
AEROWay® - Fine 15-SIPS	HDM 00-15-SIPS	stufenlos / 0-15 l/min. -700 mbar (max. Vakuum) 100 l/min. (DIN-Kupplung)	G3/4 IG / ca. 70 mm
AEROWay® - Fine 1.5F-ZGA	HDM 00-1.5F-ZGA	stufenlos / 0-1.5 l/min.	DIN Stecker 13260
AEROWay® - Fine 1.5FS-ZGA	HDM 00-1.5FS-ZGA	stufenlos / 0-1.5 l/min.	dto. + 1.5 m Schlauch
AEROWay® - Fine 1.5F2-ZGA	HDM 00-1.5F2-ZGA	stufenlos / 0-1.5 l/min.	DIN Stecker 13260
AEROWay® - Fine 1.5F2S-ZGA	HDM 00-1.5F2S-ZGA	stufenlos / 0-1.5 l/min.	dto. + 1.5 m Schlauch
AEROWay® - Fine 5F-ZGA	HDM 00-5F-ZGA	stufenlos / 0-5 l/min.	DIN Stecker 13260
AEROWay® - Fine 5FS-ZGA	HDM 00-5FS-ZGA	stufenlos / 0-5 l/min.	dto. + 1.5 m Schlauch
AEROWay® - Fine 5F2-ZGA	HDM 00-5F2-ZGA	stufenlos / 0-5 l/min.	DIN Stecker 13260
AEROWay® - Fine 5F2S-ZGA	HDM 00-5F2S-ZGA	stufenlos / 0-5 l/min.	dto. + 1.5 m Schlauch
AEROWay® - Fine 15F-ZGA	HDM 00-15F-ZGA	stufenlos / 0-15 l/min.	DIN Stecker 13260
AEROWay® - Fine 15FS-ZGA	HDM 00-15FS-ZGA	stufenlos / 0-15 l/min.	dto. + 1.5 m Schlauch
AEROWay® - Fine 15F2-ZGA	HDM 00-15F2-ZGA	stufenlos / 0-15 l/min.	DIN Stecker 13260
AEROWay® - Fine 15F2S-ZGA	HDM 00-15F2S-ZGA	stufenlos / 0-15 l/min.	dto. + 1.5 m Schlauch
AEROWay® - Fine 30F-ZGA	HDM 00-30F-ZGA	stufenlos / 0-30 l/min.	DIN Stecker 13260
AEROWay® - Fine 30FS-ZGA	HDM 00-30FS-ZGA	stufenlos / 0-30 l/min.	dto. + 1.5 m Schlauch
AEROWay® - Fine 30F2-ZGA	HDM 00-30F2-ZGA	stufenlos / 0-30 l/min.	DIN Stecker 13260
AEROWay® - Fine 30F2S-ZGA	HDM 00-30F2S-ZGA	stufenlos / 0-30 l/min.	dto. + 1.5 m Schlauch

Alle Druckminderer sind auch für die Gasart Air (Druckluft) erhältlich - die Artikel-Nummer ist dann HDM 04-...
Der 02- oder Air-Abgang ist UNF 9/16" - ohne (alle ZGA) / - mit (alle anderen) Schlauchanschlussstille 6 mm
AG = Ausseingewinde / IG = Innengewinde

13. Abbildungen und technische Daten

13.1 AEROway® - Fix II / Fix II-PS

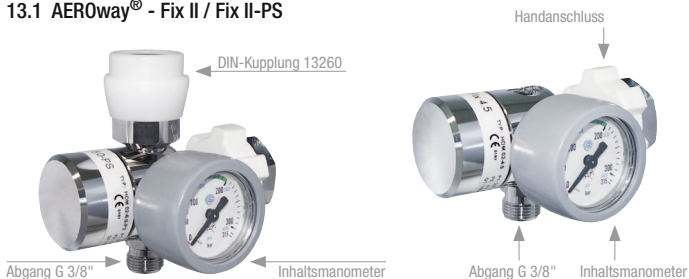

Technische Daten

Medizinischer Druckminderer
für Sauerstoff (O₂), Druckluft (Air), Lachgas (N₂O) *
mit Inhaltsmanometer

Eingang Hochdruck-Handanschluss -> länderspezifisches Gewinde
Abgang G 3/8" Außengewinde

Zusätzlicher Abgang 4,5 bar bzw. 5.0 bar
(100 l/min; ab SN 06000001 160 l/min) als Kupplung nach DIN 13260
(AEROway® - Fix II 4.5-PS / 5.0-PS, Air 5.0-PS sowie N2O 5.0-34-PS u. N2O 5.0-38-PS)

AEROway® - Fix II 4.5 / 5.0: 700 g; L 104 mm, H 61 mm, B 80 mm, Ø 40 mm

AEROway® - Fix II 4.5-PS / 5.0-PS: 760 g; L 104 mm, H 95 mm, B 80 mm, Ø 40 mm

Lagertemperatur: - 20 °C bis + 40 °C

Arbeitstemperatur: - 10 °C bis + 40 °C

P1 - max. Eingangsdruck: 200 bar

P2 - Ausgangsdruck: fest eingestellt im Bereich 4.5 - 5,0 bar *

Q1 - Flow in l/min: fest eingestellt auf 100 * l/min / ab SN 06000001
fest eingestellt auf 180 l/min *


Seriennummer: siehe Gravur (8-stellige Gerätenummer)

Wartung alle 60 Monate durch den Hersteller

Geräteklasse nach MPG II b

* Unbedingt die Kennzeichnung am Druckminderer beachten!

13.2 AEROWay® - Fix I 4 / Fix I 6 / Fix I 8 / Fix I 10

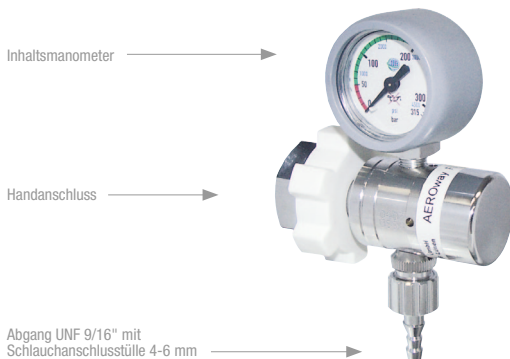

Technische Daten

Medizinischer Druckminderer
für Sauerstoff (O₂) *
mit Inhaltsmanometer

Eingang Hochdruck-Handanschluss -> länderspezifisches Gewinde
Abgang UNF 9/16", Aussengewinde mit Schlauchanschlussstülle für 4-6 mm Schläuche

Gewicht: 460 g

Abmessungen: L 79 mm, H 99 mm, B 49 mm, Ø 32 mm

Lagertemperatur: - 20 °C bis + 40 °C

Arbeitstemperatur: - 10 °C bis + 40 °C

P1 - max. Eingangsdruck: 200 bar

P2 - Ausgangsdruck: 1.6 - 5.0 bar *


Q1 - Flow in l/min: 4 / 6 / 8 oder 10 l/min*

Seriennummer: siehe Gravur (8-stellige Gerätenummer)

Wartung alle 60 Monate durch den Hersteller

Geräteklasse nach MPG II b

* Unbedingt die Kennzeichnung am Druckminderer beachten!

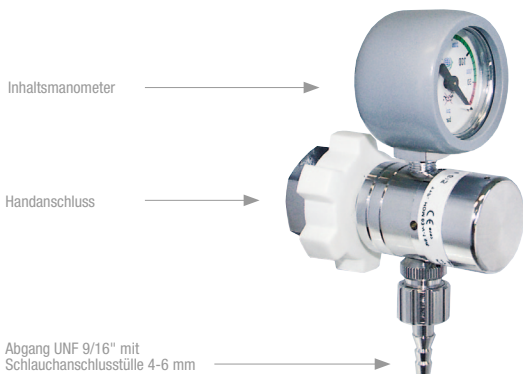

Technische Daten

Medizinischer Druckminderer
für Sauerstoff (O₂) *
mit Inhaltsmanometer

Eingang Hochdruck-Handanschluss -> länderspezifisches Gewinde
Abgang UNF 9/16", Aussengewinde mit Schlauchanschlussstülle für 4-6 mm Schläuche

Gewicht:	460 g
Abmessungen:	L 79 mm, H 99 mm, B 49 mm, Ø 32 mm
Lagertemperatur:	- 20 °C bis + 40 °C
Arbeitstemperatur:	- 10 °C bis + 40 °C
P1 - max. Eingangsdruck:	200 bar
P2 - Ausgangsdruck:	1.6 - 5.0 bar *
Q1 - Flow in l/min:	2 oder 5 l/min *
Seriennummer:	siehe Gravur (8-stellige Gerätenummer)

Wartung alle 60 Monate durch den Hersteller
Geräteklasse nach MPG II b

* Unbedingt die Kennzeichnung am Druckminderer beachten!

13.4 AEROWay® - Fix II und Fix I - Übersicht Druckmindererprogramm

Modell/Bezeichnung	Best.-Nr.	Einstellung	Leistung	(Druck/Flow)	Anschluss	Bolzen
AEROWay® - Fix I 4	HDM 03-4	fest eingestellt	4 l/min		G3/4	ca. 15 mm
AEROWay® - Fix I 6	HDM 03-6	fest eingestellt	6 l/min		G3/4	ca. 15 mm
AEROWay® - Fix I 8	HDM 03-8	fest eingestellt	8 l/min		G3/4	ca. 15 mm
AEROWay® - Fix I 10	HDM 03-10	fest eingestellt	10 l/min		G3/4	ca. 15 mm
AEROWay® - Fix I 1.6/2	HDM 03-1.6/2	fest eingestellt	1.6 bar	2 l/min	G3/4	ca. 15 mm
AEROWay® - Fix I 1.6/5	HDM 03-1.6/5	fest eingestellt	1.6 bar	5 l/min	G3/4	ca. 15 mm
AEROWay® - Fix II 4.5 AEROWay® - Fix II 4.5 R	HDM 02-4.5 HDM 02-4.5 R	fest eingestellt	4.5 bar	100 l/min (ab SN 06000001 180 l/min)	G3/4	ca. 50 mm
AEROWay® - Fix II 5.0	HDM 02-5.0	fest eingestellt	5.0 bar	100 l/min (ab SN 06000001 180 l/min)	G3/4	ca. 50 mm
AEROWay® - Fix II 4.5-PS	HDM 02-4.5-PS	fest eingestellt	4.5 bar	100 l/min (an der DIN-Kupplung 13260 100 l/min, ab SN 06000001 180 l/min (an der DIN-Kupplung 13260 160 l/min)	G3/4	ca. 50 mm
AEROWay® - Fix II 5.0-PS	HDM 02-5.0-PS	fest eingestellt	5.0 bar	"	G3/4	ca. 50 mm
AEROWay® - Fix II AIR 5.0	HDM 04-5.0	fest eingestellt	5.0 bar	100 l/min (ab SN 06000001 180 l/min)	G5/8	ca. 50 mm
AEROWay® - Fix II AIR 5.0-PS	HDM 04-5.0-PS	fest eingestellt	5.0 bar	100 l/min (an der DIN-Kupplung 13260 100 l/min, ab SN 06000001 180 l/min (an der DIN-Kupplung 13260 160 l/min)	G5/8	ca. 50 mm
AEROWay® - Fix II N20 5.0-34	HDM 05-5.0-34	fest eingestellt	5.0 bar	60 l/min	G3/4	ca. 50 mm
AEROWay® - Fix II N20 5.0-38	HDM 05-5.0-38	fest eingestellt	5.0 bar	60 l/min	G3/8	ca. 50 mm
AEROWay® - Fix II N20 5.0-34-PS	HDM 05-5.0-34-PS	fest eingestellt	5.0 bar	160 l/min/DIN-Kupplung 13260	G3/4	ca. 50 mm
AEROWay® - Fix II N20 5.0-38-PS	HDM 05-5.0-38-PS	fest eingestellt	5.0 bar	160 l/min/DIN-Kupplung 13260	G3/8	ca. 50 mm

14. Ersatzteile für AEROWay® - Druckminderer / Flowregler

AEROWay® - SA 01-6

Schlauchanschlussstülle, verchromt, mit Dichtung, Eingangsgewinde G 3/8", Tülle für 6 mm Schläuche

Art. Nr.: HSA 01-6



AEROWay® - SA 01-6-B

Schlauchanschlussstülle, verchromt, mit Dichtung, Eingangsgewinde G 3/8", bewegliche gerade Tülle für 6 mm Schläuche • **Art. Nr.: HSA 01-6-B**



AEROWay® - SA 04-6

Schlauchanschlussstülle, verchromt, mit Dichtung, Eingangsgewinde UNF 9/16", Tülle für 6 mm Schläuche

Art. Nr.: HSA 04-6



AEROWay® - SA 04-6-B

Schlauchanschlussstülle, verchromt, mit Dichtung, Eingangsgewinde UNF 9/16", ansonsten wie AEROWay® - SA 01-6-B

Art. Nr.: HSA 04-6-B



AEROWay® - AD 38916

Adapter, verchromt, mit Dichtung, G 3/8" Innengewinde und UNF 9/16" Außengewinde • **Art. Nr.: HAD 01-38916**



AEROWay® - Anschlussbolzen O2

lang, mit O-Ring, für AEROWay® - Fast, Fine und Fix • **Art. Nr.: HDM 01-ABL-D**

AEROWay® - Anschlussbolzen AIR

lang, mit O-Ring, für AEROWay® - Fast, Fine und Fix • **Art. Nr.: HDM 04-ABL-D**





AEROWay® - O-Ring/Dichtung O₂

für Anschlussbolzen

Art. Nr.: HDM 01-0-D



AEROWay® - Anschlussmutter O₂

ohne Kunststoffhandrad

Art. Nr.: HDM 01-AM-D



AEROWay® - Anschlussmutter O₂

mit Kunststoffhandrad, weiß

Art. Nr.: HDM 01-AMK-D

AEROWay® - PIN-Index-Set O₂

PIN-Index-Bügel, -Bolzen und Dichtung

Art. Nr.: HDM 01-AB-PIS

AEROWay® - PIN-Index-Set N₂O

PIN-Index-Bügel, -Bolzen und Dichtung

Art. Nr.: HDM 05-AB-PIS

AEROWay® - AD 38916

Dichtung, für PIN-Index-Anschlussbolzen

Art. Nr.: HDM 01-D-PI

AEROWay® - Ausgangsanschluss

ohne O-Ring, E: M 10x1, A: M 12 x 1,25

Art. Nr.: HDM 01-AA-12125



AEROWay® - Ausgangsanschluss

ohne O-Ring, E: M 10x1, A: G 3/8"

Art. Nr.: HDM 01-AA-38

AEROWay® - Ausgangsanschluss

ohne O-Ring, E: M 10x1, A: UNF 9/16"

Art. Nr.: HDM 01-AA-916

AEROway® - Ausgangsanschluss

ohne O-Ring, E: G 3/8", A: G 3/8"

Art. Nr.: HDM 02-AA-38



AEROway® - O-Ring M 10x1

für E: M 10x1

Art. Nr.: HDM 01-AA0-101



AEROway® - O-Ring M G 3/8

für E: G 3/8"

Art. Nr.: HDM 01-AA0-38

AEROway® - Verschlusschraube

ohne O-Ring, M 10 x 1

Art. Nr.: HDM 01-VS-101



AEROway® - Verschlusschraube

ohne O-Ring, G3/8"

Art. Nr.: HDM 01-VS-38

AEROway® - Flowmeter 15 L/min

für AEROway® - Fine 15

Art. Nr.: HDM 00-15-F



AEROway® - Dichtung

für Flowmeterverbindung an DIN-Kupplung

Art. Nr.: HDM 00-15FD

AEROway® - Flowmeterglas 15 L/min

für AEROway® - Fine 15

Art. Nr.: HDM00-15-FG



AEROway® - Venturi mit Absperhahn

für AEROway® - Fast 15-V und -PSV

Art. Nr.: HDM 01-V



AEROway® - Dichtung für Manometer

für Manometer, G1/8" Kupfer

Art. Nr.: HDM01-MD



AEROway® - Manometer O₂

für AEROWay® - Fast -K../Fix,
Eingang rückseitig, M 10 x 1

Art. Nr.: HDM 02-MR

AEROway® - Manometer N₂O

für AEROWay® - Fast -K../Fix,
Eingang rückseitig, M 10 x 1

Art. Nr.: HDM 05-MR



AEROway® - Manometer O₂

für AEROWay® - Fast/Fine/Vari,
Eingang unten, M 10 x 1

Art. Nr.: HDM 01-MU

AEROway® - Manometer N₂O

für AEROWay® - Fast/Fine/Vari,
Eingang unten, M 10 x 1

Art. Nr.: HDM 05-MU



AEROway® - Manometerschutzkappe

graues Gummi, 40 mm Durchmesser,
E: rückseitig • **Art. Nr.: HDM 01-MR-SK**

AEROway® - Manometerschutzkappe

graues Gummi, 40 mm Durchmesser,
E: unten • **Art. Nr.: HDM 01-MU-SK**



AEROway® -

Sicherheitstechnische Kontrolle

für Druckminderer/alle 5 Jahre

Art. Nr.: HSTK 01-DM-5J

AEROway® -

Sicherheitstechnische Kontrolle

für Druckminderer/alle 10 Jahre

Art. Nr.: HSTK 01-DM-10J

HBA 01-DM_DE | Stand 09.06.2011 | Revision 4
Ausstattungs- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Zertifiziertes QM-System nach EG-Richtlinien 93/42/EWG
Anh. II.3 und Anh. V.3 (EN ISO 13485:2003+AC:2007)

© HUM Gesellschaft für Homecare und Medizintechnik mbH

HUM

Gesellschaft für Homecare
und Medizintechnik mbH

Zum Pier 79 | D-44536 Lünen

FON +49 (0)2 31/ 88 08 85-0 | FAX +49 (0)2 31/ 88 08 85-58

Mail: sales@hum-online.de | <http://www.hum-online.de>